

1E95 Challenger

- 1 **Adaptér**
vyrobený z titanu.
- 2 **Zahnutá karbonová planžeta**
pro tlumení rázů a vysoký návrat energie.
- 3 **Karbonová základní planžeta**
pro stabilitu stoje a bezpečnou chůzi.
- 4 **Vyměnitelné patní klíny**
pro přizpůsobení chodila různým sportům
nebo při individuálních požadavcích na patu
a charakteristiku odvalu.
- 5 **Výplň nártu**
pro pevnější ulpění ve sportovní botě.


Rekreační i závodní sportovci se stehenní nebo bérceovou amputací ocení 1E95 Challenger jako výborné řešení pro míčové, raketové a běžecké sporty.

Výrazné zahnutí hlavní planžety poskytuje vynikající tlumení rázů, které je nutné zejména pro sporty jako tenis nebo basketbal, a dále návrat energie pro disciplíny jako dálkový běh. Základní planžeta a nastavitelné patní tlumení zajišťují nejen bezpečnost, ale i dostatečnou kontrolu při rychlém pohybu.

Challenger se vejde do většiny sportovních bot a dodává se s vyměnitelnými patními klíny, takže je vhodný pro širokou škálu sportovních aktivit.

Výhody

- Vhodný pro nejrůznější sporty (např. tenis, basketbal, fotbal, běh, vodní sporty, atd.)
- Výborné tlumení rázů a vysoký návrat energie
- Stabilní chůze i stoj díky patě i základní planžetě
- Vyměnitelné patní klíny pro přizpůsobení charakteristiky odvalu
- Voděodolný

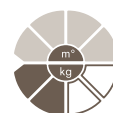

Max. 110kg

Technické údaje

Maximální tělesná hmotnost	110 kg
Velikosti	23–30 cm
Kryt	Není zapotřebí, chodidlo je ale možné používat pouze ve vhodné obuvi.
Přizpůsobení	Individuální nastavení tuhosti paty díky dvěma patním klínům, které jsou součástí balení (použití bez patních klínů není možné).
Hmotnost*	800 g
Systémová výška*	156 mm
Světlá výška*	174 mm
Vhodné sporty	míčové, raketové, běžecké a vodní sporty
Doporučené kolenní klouby	Genium, Genium X3, C-Leg

*Technické údaje odpovídají velikosti 27–28 cm.

1E95 Challenger

Fax pro objednání +420 377 825 036 • E-mail: vavrikova@ottobock.cz

Zákazník		Dodací adresa (pokud je odlišná od zákaznickovy adresy)	
Číslo zákazníka		Číslo zákazníka	
Firma		Firma	
Ulice		Ulice	
PSČ / Obec		PSČ / Obec	
Ortotik-protetik		Konečný zákazník	

Množství	Obj. č.	Strana	Velikost	-	Tuhost	-	P /	0
	1E95=	N		-		-	P /	0
	1E95=	N		-		-	P /	0

Příklad objednání 1E95 Challenger

1E95=N2526-3-P/0

Velikost	
23–24 cm	2324
25–26 cm	2526
27–28 cm	2728
29–30 cm	2930

Tabulka tuhostí

Tělesná hmotnost \ Velikosti	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm
	50 – 70 kg	2		2		2		
71 – 90 kg			3		3			3
91 – 110 kg			4		4			4



- Balení zahrnuje výplň nártu (2Z95), sadu dvou patních klínů (2F95) o různých tuhostech a speciální lžici na obouvání bot (2C101).

Výběr patních klínů

Obj. č.	Tělesná hmotnost	Stupně tuhosti patního klínu*
2F95=2330-2	50–70 kg	30 a 35
2F95=2330-3	71–110 kg	40 a 45

*Poznámka: Menší číslo znamená měkčí klín

Balení zahrnuje dva patní klíny odpovídající tělesné hmotnosti uživatele. V případě potřeby je možno objednat dodatečnou sadu.

Přídavné komponenty

Množství	Obj. č.	Množství	Obj. č.

Datum Město Podpis