


Taleo Harmony 1C52

Chodidlo připravené žít.

Taleo Harmony jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede.

Optimální cesta je připravena:

- Integrovaný podtlakový systém Harmony P3 zajišťuje pevnější spojení pahýlu s protézou, lepší kontrolu protézy a propriocepci, minimalizuje podráždění kůže a stabilizuje objem pahýlu
- Vysoká schopnost torze (+/- 10°) odlehčuje pahýl a společně s vertikálním tlumením rázů (až do 15 mm) zajišťuje uživateli při chůzi a dalších aktivitách větší komfort
- Dvojitě planžety a pružná karbonová základna podporují hladký odval chodidla a efektivní návrat nahromaděné energie při jakékoliv rychlosti chůze
- Jedinečné flexibilní spojení karbonových planžet přednoží dokáže chodidlo optimálně přizpůsobovat různým typům terénu
- Třemi různými patními klíny nastavíte úroveň tlumení rázů podle potřeby

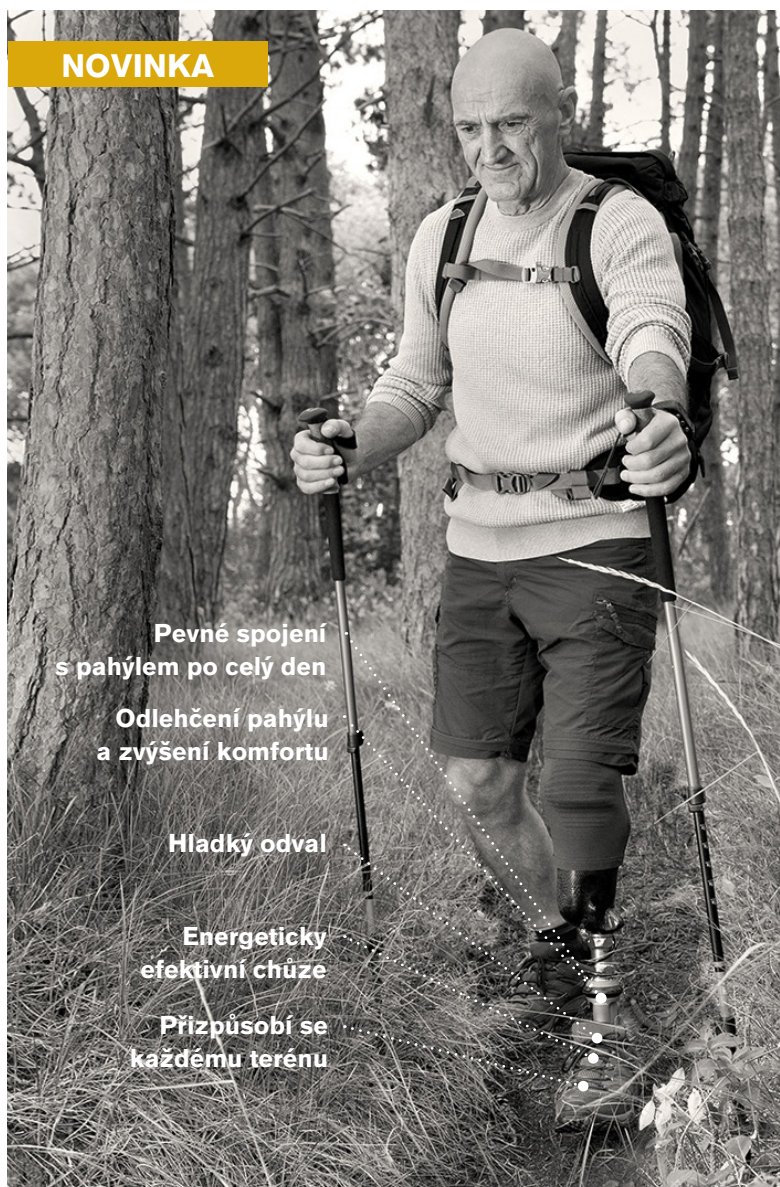

Technické údaje

Stupeň aktivity	3–4
Max. tělesná hmotnost	150 kg
Strana	levá (L), pravá (R)
Velikosti	22–30 cm
Kosmetický kryt chodidla	Úzký tvar pro podpatek 15 +/- 5 mm (velikost 22–25 cm) Normální tvar pro podpatek 10 +/- 5 mm (velikost 24–30 cm)
Barva kosmetického krytu	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost bez kosmetického krytu*	751 g
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	980 g
Stavební výška	185 mm (s normálním kosmetickým krytem*)
Ostatní	Integrovaný podtlakový systém Harmony P3; možná torze v rozsahu ± 10°; vertikální tlumení rázů až do 15 mm

* Pro velikost 26 cm



Taleo Harmony 1C52

Objednací list

Zákazník		Adresa dodání (pokud je jiná než u zákazníka)	
Zákazník č.		Zákazník č.	
Firma		Firma	
Ulice		Ulice	
PSČ/Obec		PSČ/Obec	
Ortotik-protetik		Telefon	

Výběr tuhosti v závislosti na:

1 Tělesné hmotnosti a aktivitě a také

Tělesná hmotnost [kg]	Normální aktivity	Vysoká aktivity
do 51	1	2
52 – 58	2	3
59 – 67	3	4
68 – 77	4	5
78 – 88	5	6
89 – 100	6	7
101 – 115	7	8
116 – 130	8	9
131 – 150	9	–

2 Velikosti chodidla

Velikost	Tuhost								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22						–	–	–	–
23							–	–	–
24								–	–
25								*	–
26								*	–
27	–	–						*	*
28	–	–						*	*
29	–	–						*	*
30	–	–	–					*	*

Je k dispozici úzký kryt chodidla (výška podpatku 15 ± 5 mm)
 Jsou k dispozici oba kryty chodidla
 Je k dispozici normální kryt chodidla (výška podpatku 10 ± 5 mm)

* Nekombinujte se C-Leg 4 3C88-3/3C98-3

Příklad pro objednání


1C52=R26-4-P/4N

Počet ks	Obj. č.	Strana	Velikost	Tuhost	P /	Barva	Tvar
	1C52=				P /		
Strana			Velikost [cm]			Barva	Tvar
Pravá	R		22, 23, ..., 30			Běžová 4	Úzký S
Levá	L					Světle 15 hnědá	22–25 cm Normální N 24–30 cm

Rozsah dodávky zahrnuje chodidlo Taleo Harmony 1C52, kosmetický kryt chodidla 2C15 vč. krytky, sadu patních klínů 2F50 (3 různé stupně tvrdosti), náhradní sadu funkčního kroužku 2Z360, lůžkový konektor 2R117=0, předkomprimační sadu a jednu černou punčošku Spectra.



Doporučené kombinace**

TT	Caleo 3D Liner 6Y95 + Jednocestný ventil 4R140 + Nákolenka ProFlex Plus 453A30/40 nebo Uno 3D Liner 6Y512 + Jednocestný ventil 4R136 + Nákolenka ProFlex Plus 453A30/40
	Hliníkové adaptéry

** Veškeré komponenty jsou prodávány jednotlivě. Kompatibilita s chodidlem Taleo Harmony 1C52 zajišťuje optimální výkon pomůcky. Ortotic-protetici musí komponenty vybírat na základě individuálních kritérií uživatele.