


Taleo Harmony 1C52

Chodidlo připravené žít.

Taleo Harmony jsme vyvinuli pro aktivní uživatele, kteří se pohybují v tom nejrůznějším prostředí uvnitř i venku a chtějí chodit bez námahy všude tam, kam je život zrovna zavede.

Optimální cesta je připravena:

- Integrovaný podtlakový systém Harmony P3 zajišťuje pevnější spojení pahýlu s protézou, lepší kontrolu protézy a propriocepci, minimalizuje podráždění kůže a stabilizuje objem pahýlu
- Vysoká schopnost torze (+/- 10°) odlehčuje pahýl a společně s vertikálním tlumením rázů (až do 15 mm) zajišťuje uživateli při chůzi a dalších aktivitách větší komfort
- Dvojitě planžety a pružná karbonová základna podporují hladký odval chodidla a efektivní návrat nahromaděné energie při jakékoliv rychlosti chůze
- Jedinečné flexibilní spojení karbonových planžet přednoží dokáže chodidlo optimálně přizpůsobovat různým typům terénu
- Třemi různými patními klíny nastavíte úroveň tlumení rázů podle potřeby

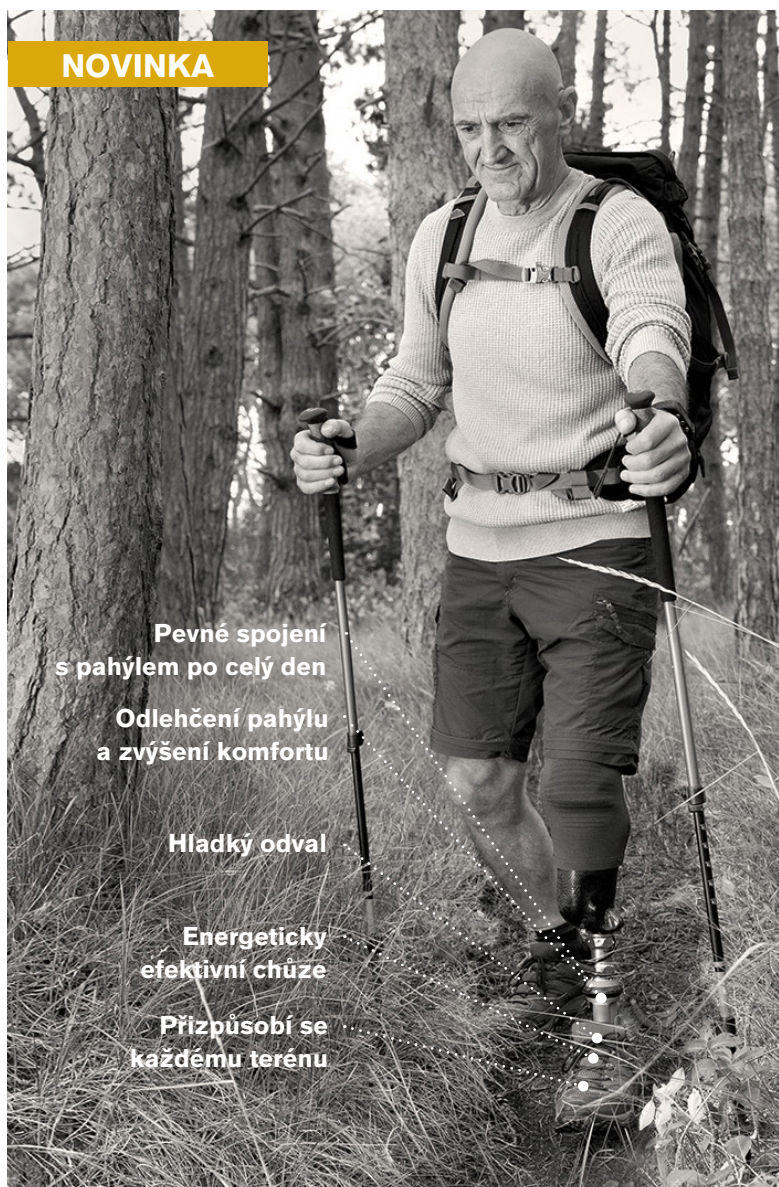

NOVINKA

Pevné spojení
s pahýlem po celý den

Odlehčení pahýlu
a zvýšení komfortu

Hladký odval

Energeticky
efektivní chůze

Přizpůsobí se
každému terénu

Technické údaje

Stupeň aktivity	3–4
Max. tělesná hmotnost	150 kg
Strana	levá (L), pravá (R)
Velikosti	22–30 cm
Kosmetický kryt chodidla	Úzký tvar s podpatkem 15 +/- 5 mm (velikost 22–25 cm) Normální tvar s podpatkem 10 +/- 5 mm (velikost 24–30 cm)
Barva kosmetického krytu	běžová (4), světle hnědá (15)
Hmotnost bez kosmetického krytu*	751 g
Hmotnost s normálním kosmetickým krytem*	980 g
Stavební výška	185 mm (s normálním kosmetickým krytem*)
Ostatní	Integrovaný podtlakový systém Harmony P3; možná torze v rozsahu ± 10°; vertikální tlumení rázů až do 15 mm

* Pro velikost 26 cm



Odolné proti
povětrnostním
vlivům



